



Il est impératif d'utiliser  
ce produit de manière  
responsable.

Veillez lire  
attentivement le mode  
d'emploi avant d'utiliser  
l'appareil.



**EVOLUTION™**  
IPL HAIR REMOVER

mode d'emploi



## AVERTISSEMENTS

- **Veillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.**
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes présentant une déficience physique, sensorielle ou mentale, novices ou manquant de connaissances à condition qu'elles soient surveillées lors de l'utilisation de cet appareil ou qu'elles aient été formées à l'utilisation de cet appareil et ce, en toute sécurité et à condition qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer ni entretenir l'appareil sans surveillance.
- Ne jamais diriger l'appareil sur ou près des yeux.
- Réverbération dangereuse : Veuillez ôter tous les bijoux à proximité de la zone concernée avant utilisation.
- Ne PAS utiliser à proximité de matériaux inflammables.
- Ne PAS utiliser cet appareil en milieu humide (près d'une baignoire ou d'une douche).
- Ne PAS utiliser si de l'eau pénètre dans l'appareil.
- Ne PAS immerger dans l'eau.

## AVERTISSEMENTS

### **Ne convient pas aux carnations et aux types de cheveux suivants :**

- L'IPL ne convient pas aux carnations brunes comme aux personnes d'ascendance afro-antillaise, africaine noire, indienne ou pakistanaise. Reportez-vous à la rubrique "Types de peau compatibles" et procédez toujours à un test épicutané.
- L'IPL ne convient pas à l'élimination des poils roux, blonds clairs ou blancs.

### **Ne pas utiliser l'appareil sur les zones suivantes :**

EVOLUTION™ IPL HAIR REMOVER

- Ne PAS utiliser l'appareil sur les tatouages, le maquillage permanent, les boutons, l'acné, les verrues, les poils des points noirs ou des grains de beauté, les taches de rousseur foncées, si vous souffrez d'une maladie de peau, sur les taches de naissance, les brûlures, les tétons, les parties génitales et anales, les varices, de l'eczéma, un herpès labial, un psoriasis, des plaies à vif ou sur une pigmentation anormale de la peau comme un albinisme et un vitiligo ou sur peau abîmée.

## AVERTISSEMENTS

### **Ne PAS utiliser dans les cas suivants :**

- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous souffrez ou avez souffert d'épilepsie ou si vous prenez des médicaments connus pour accroître la photosensibilité. Si vous avez des antécédents de crises d'épilepsie, nous vous recommandons de ne PAS utiliser l'épilation à lumière pulsée. Certains médicaments courants peuvent causer une photosensibilité. Si vous prenez des médicaments, il convient donc de consulter les avertissements relatifs à la photosensibilité et, si vous avez un doute, de consulter votre médecin. Parmi les médicaments courants pouvant

causer une photosensibilité, on peut citer : les diurétiques, certains antibiotiques, les antidépresseurs tricycliques et les médicaments prescrits pour les problèmes de thyroïde, le lupus et l'arthrite.

- Ne PAS utiliser si vous avez ou avez eu un cancer de la peau.
- Ne PAS utiliser si êtes atteint de diabète, d'une maladie rénale, d'une maladie cardiaque ou si vous avez des problèmes de thyroïde.
- Ne PAS utiliser sur la même zone à plusieurs reprises au cours de la même séance.

## AVERTISSEMENTS

### Réactions possibles :

- Le plupart des personnes ressentent une sensation de chauffe pendant l'application. Chez certaines personnes, la peau peut rougir légèrement. Dans la plupart des cas, ces effets disparaissent dans les 24 heures. Toutefois, dans de rares cas, ils peuvent persister jusqu'à 72 heures.
- Les effets suivants exigent d'arrêter d'utiliser l'appareil :
  - Douleur au niveau de la zone d'application

- Démangeaison au niveau de la zone d'application
- Rougeur


Dans tous les cas, refroidissez la zone. Nous conseillons d'utiliser un gel refroidissant à base d'aloé vera. Si les symptômes persistent après 48 heures, consultez un médecin.

- En cas d'apparition de cloques ou en cas de brûlure, consultez immédiatement un médecin.


## INTRODUCTION

L'épilateur **EVOLUTION™** IPL HAIR REMOVER utilise la technologie de la lumière intense pulsée (IPL), à la pointe de la technologie. Placé contre la peau, l'appareil émet des impulsions douces de lumière intense ciblées sur le follicule pileux. Ces impulsions agissent pour neutraliser la racine du poil sans endommager la périphérie. Les dommages durablement causés à la racine du poil neutralisent ainsi le follicule pileux. Utilisé régulièrement, cet appareil permet de réduire la pilosité de façon permanente. L'IPL permet d'épiler les zones plus étendues comme les jambes, les bras, les aisselles, le maillot, le dos et torse, ainsi que certaines parties du visage.

- 1** Tableau de bord
- 2** Indicateurs d'intensité (1-5)
- 3** Bouton de réduction de l'intensité (-)
- 4** Bouton d'augmentation de l'intensité (+)
- 5** Verrouillage de sécurité
- 6** Clé de sécurité (x2)  
(x1) fixée au câble d'alimentation, (x1) clé dans le sac
- 7** Bouton de mise en route
- 8** Témoin lumineux indicateur

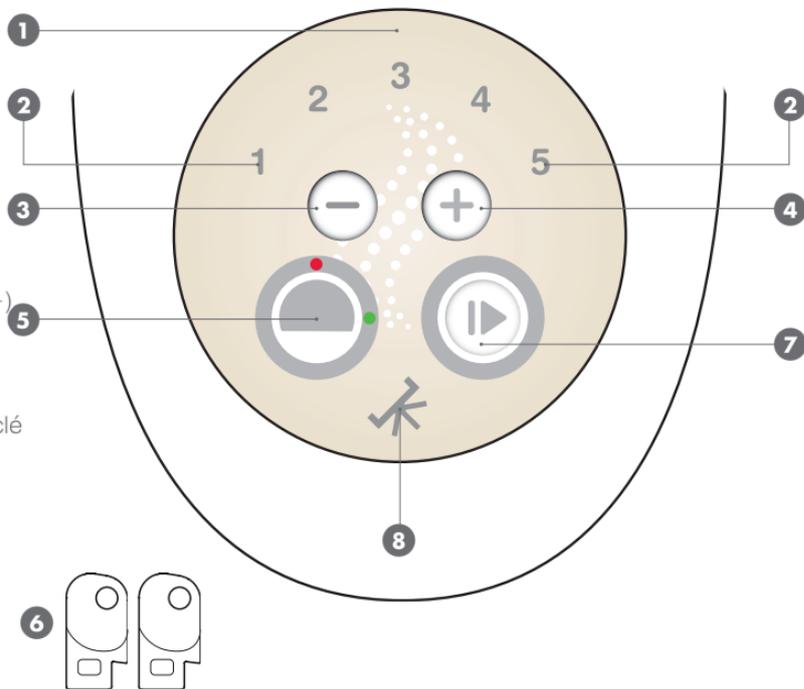

- 9 Orifices d'aération
- 10 Tête active
- 11 Fenêtre IPL orange
- 12 Lampe-cartouche (à l'intérieur de la tête active)
- 13 Bouton d'activation IPL
- 14 Câble d'alimentation secteur
- 15 Boutons de libération de la tête active
- 16 Capteurs cutanés (x4)
- 17 Rasoir
- 18 Lampe-cartouche de rechange

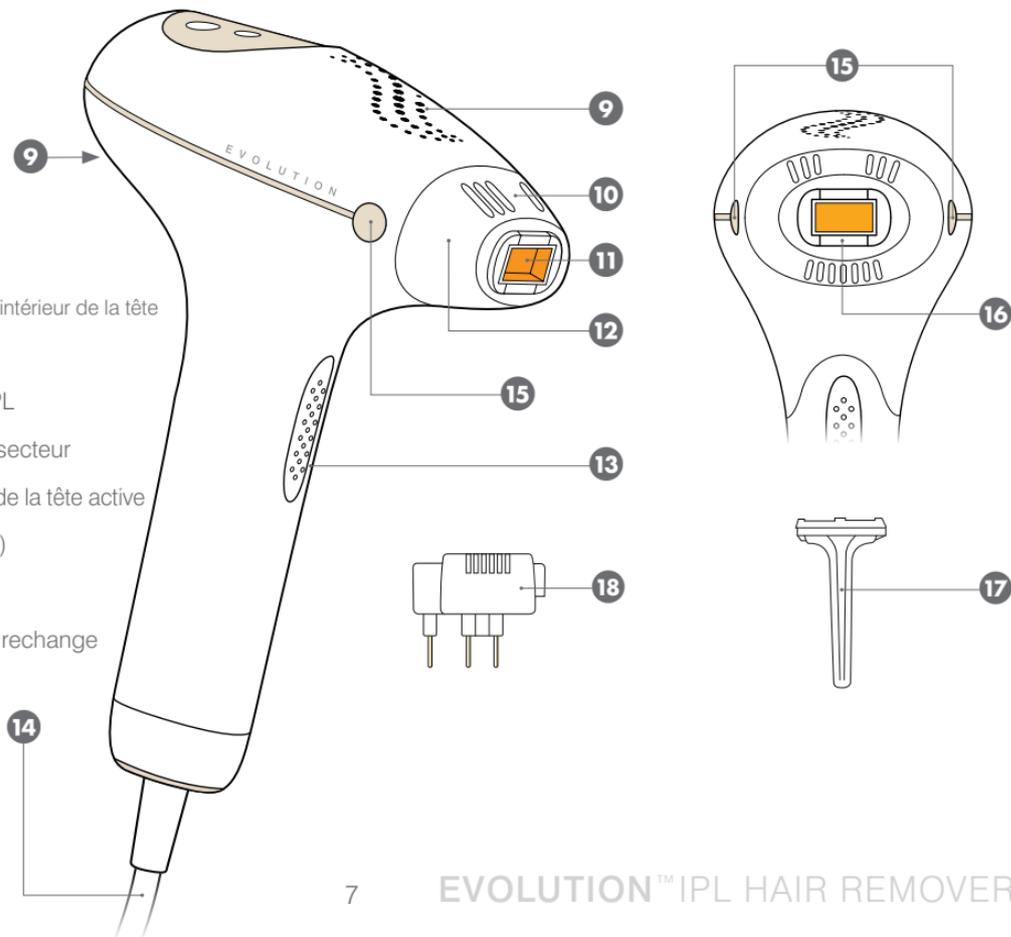

# TYPES DE PEAU COMPATIBLES ET NON COMPATIBLES

Votre épilateur Evolution IPL Hair Remover convient aux peaux claires à mates et aux peaux foncées. Pour une application efficace, les poils doivent être plus foncés que la peau à proximité. Les meilleurs résultats sont obtenus sur peau claire et des poils foncés.


Vous constaterez peut-être qu'en fonction des zones, il faut utiliser différentes intensités. Il convient de tester chaque zone, afin de déterminer l'intensité maximale adaptée.

Utilisez le nuancier de teint en corrélation avec le tableau (page 10), afin de déterminer précisément votre carnation/type de peau.

## NUANCIER DE TEINT




Types de peau compatibles avec l'IPL

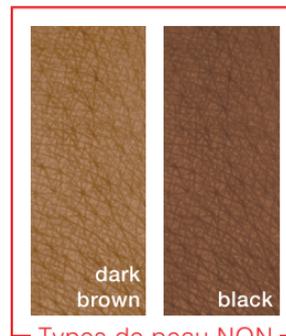

Types de peau NON compatibles avec l'IPL

## RÉCAPITULATIF DE SOIN

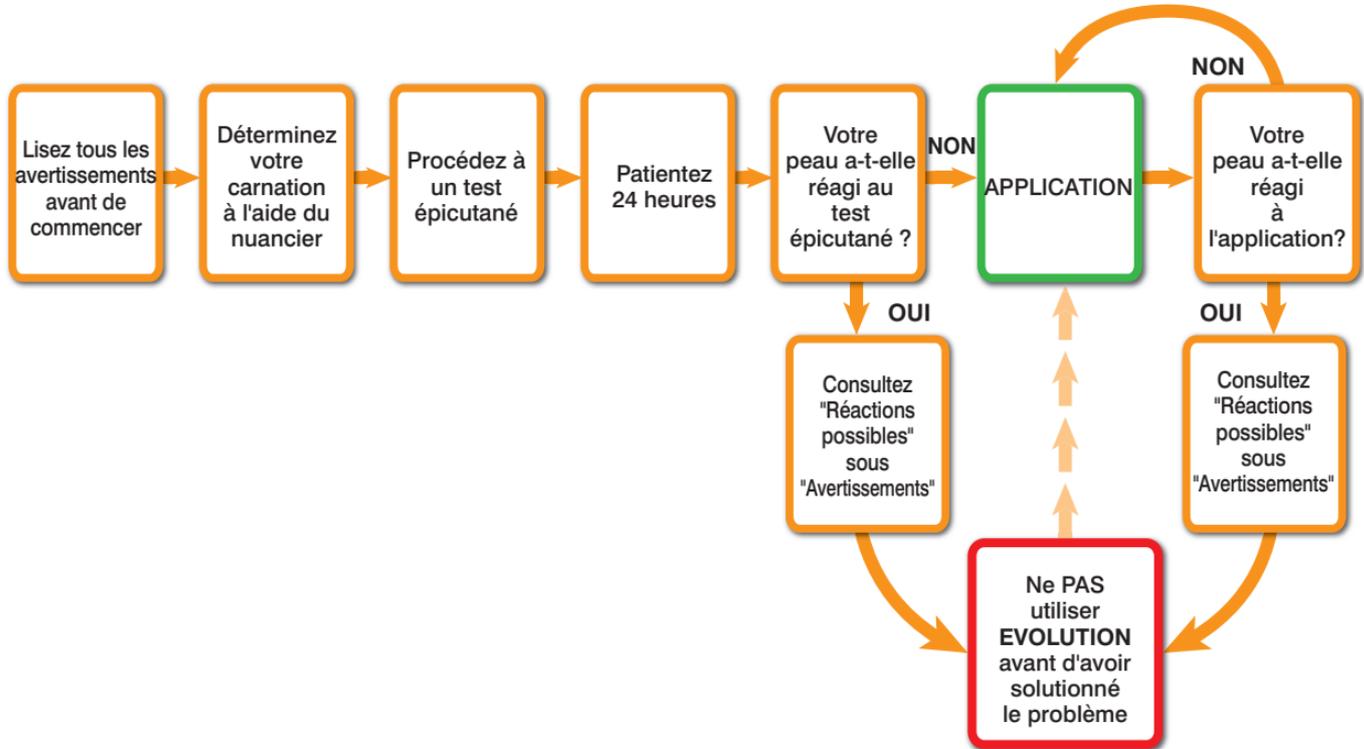

## TEST ÉPICUTANÉ

24 heures avant utilisation, vérifiez que votre peau ne réagit pas en effectuant un test sur une petite zone.

Le test épicutané permet de confirmer l'intensité maximale adaptée à votre type de peau.

Utilisez chaque intensité sur une zone (bras ou jambe par ex.) jusqu'à atteindre l'intensité maximale adaptée à votre type de peau (reportez-vous au Nuancier de teint). Utilisez le bouton (+) pour augmenter l'intensité d'un niveau à chaque fois, appliquez l'appareil sur une autre zone et procédez ainsi à chaque fois.

Quand vous ressentez une gêne, ceci signifie que l'intensité précédente est l'intensité maximale que vous devez utiliser.

Votre peau peut légèrement rougir, dans l'heure suivant l'utilisation, mais ce n'est pas systématique. Toutefois, si une rougeur persiste après 24 heures, ceci peut indiquer que l'intensité sélectionnée était trop élevée pour votre type de peau.

**IMPORTANT :** la carnation de la peau diffère en fonction des parties du corps, vous constaterez donc peut-être que vous devez utiliser différentes intensités sur différentes parties de votre corps. Il convient de tester chaque zone, afin de déterminer l'intensité maximale adaptée.

EVOLUTION™ IPL HAIR REMOVER

## NUANCIER DE TEINT

Phototype	Carnation	Réaction au soleil	Intensité maximale
I	Très claire, "translucide"	Brûle toujours, ne bronze jamais	1 2 3 4 5
II	Claire	Brûle toujours	En fonction du test épicutané, les 5 intensités peuvent être utilisées
III	Claire à mate claire	Brûle légèrement	1 2 3 4 5
IV	Mate/Brune	Brûle rarement, bronze facilement	En fonction du test épicutané, les intensités 1, 2 et 3 peuvent être utilisées
V	Brune foncée	Brûle très rarement	<b>Types de peau INCOMPATIBLES avec l'IPL</b>
VI	Noire	Ne brûle jamais	

## AVANT DE COMMENCER

Veillez vous assurer d'avoir lu et compris la rubrique "Avertissements" avant utilisation.


- Ne pas utiliser de méthode dépilatoire qui arrache le poil du follicule, l'IPL devenant alors inefficace.
- Retirez tous les bijoux situés aux abords de la zone d'application.
- Assurez-vous d'avoir procédé à un test épicutané sur la zone d'application 24 heures avant utilisation et veillez à avoir déterminé l'intensité maximale.
- La première application se fait toujours à l'intensité 1 et peut uniquement être augmentée d'un niveau une fois l'application terminée.

### **AUGMENTATION DE L'INTENSITÉ**

Chaque fois que vous utilisez votre épilateur Evolution IPL Hair Remove, vous devez flasher votre peau à chaque intensité avant de pouvoir augmenter l'intensité au niveau supérieur. Il s'agit d'une fonctionnalité de sécurité afin que vous ayez bien conscience de l'intensité d'application à chaque niveau.


L'appareil effectue un contrôle automatique, pendant quelques secondes, à chaque augmentation d'intensité. Pendant ce laps de temps, les voyants d'intensité s'allument de bas en haut.

## CONSIGNES D'UTILISATION

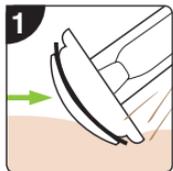


**ÉTAPE 1**  
**Important : rasez la zone d'application.**

L'énergie lumineuse pénètre ainsi directement dans la racine du poil et évite de brûler les poils à la surface de la peau. Les poils brûlés peuvent également endommager la tête active. Dans ce cas, nous conseillons de changer la tête.

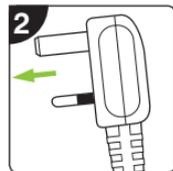

**ÉTAPE 2**  
Branchez l'appareil sur le secteur.

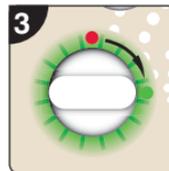

**ÉTAPE 3**  
Insérez la clé de sécurité et tournez-la dans le sens horaire, sur la position ON (alignée sur le point vert). Le cercle lumineux autour de l'interrupteur à clé clignote vert.

# CONSIGNES D'UTILISATION

## ÉTAPE 4

Saisissez le code de sécurité en appuyant sur les boutons (mis en évidence en noir) dans l'ordre suivant :



L'interrupteur à clé arrête de clignoter et passe au vert. L'appareil effectue une série de contrôles automatiques. Pendant ce laps de temps, les voyants d'intensité s'allument de bas en haut.



Lorsque ces tests sont terminés, l'intensité la plus faible s'allume et le bouton de mise en route clignote bleu, indiquant que vous pouvez effectuer votre sélection.



**Remarque :** l'appareil s'éteint si le code saisi est incorrect (l'interrupteur à clé passe de clignotant vert à clignotant orange). Tournez la clé dans le sens anti-horaire, sur la position OFF, patientez quelques secondes puis replacez la clé sur la position ON, puis saisissez de nouveau le code de sécurité correct.

# CONSIGNES D'UTILISATION




## ÉTAPE 5

Appuyez une fois sur le bouton de mise en route.

Le bouton de mise en route arrête de clignoter.

**Remarque :** à chaque réglage de l'intensité, vous devez appuyer sur le bouton de mise en route pour poursuivre.


Le témoin lumineux indicateur s'allume, il est orange.

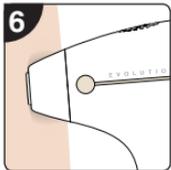

## ÉTAPE 6


Positionnez l'appareil sur la zone que vous souhaitez épiler et exercez une pression pour que l'appareil soit bien en contact avec la peau.

Lorsque les 4 capteurs cutanés sont bien en contact avec la peau, le témoin lumineux indicateur s'allume, il est bleu, ce qui indique que l'appareil peut être utilisé.

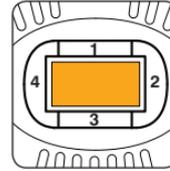

**Important :** assurez-vous que les 4 capteurs cutanés sont en contact avec la peau, faute de quoi il ne sera pas possible de flasher votre peau.


Lorsque vous appliquez l'appareil sur votre peau, vous pouvez exercer une pression plus forte à certains endroits ou ajuster l'angle de la tête active sur la peau, afin d'épouser les courbes du corps.

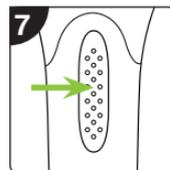

## ÉTAPE 7

Appuyez sur le bouton d'activation pour flasher la peau. Il est tout à fait normal de ressentir un échauffement au niveau de la zone d'application.


L'appareil effectue un contrôle automatique après chaque flash. Pendant ce laps de temps, les voyants d'intensité s'allument de bas en haut.

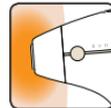

# CONSIGNES D'UTILISATION

## Remarques

- Ne PAS déplacer l'appareil pendant l'application.
- L'appareil chauffe pendant l'utilisation, ce qui est tout à fait normal.

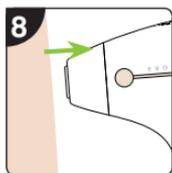

## ÉTAPE 8

Lorsque vous déplacez l'appareil sur une autre zone, les capteurs cutanés ne doivent pas être en contact avec la peau.



Si vous augmentez l'intensité pour l'application suivante, appuyez sur le bouton (+) et retournez à l'étape 5.

**Important :** ne PAS dépasser l'intensité maximale adaptée à votre type de peau..

## AUGMENTATION DE L'INTENSITÉ

Chaque fois que vous utilisez votre épilateur Evolution IPL Hair Remover, vous devez flasher votre peau à chaque intensité avant de pouvoir augmenter l'intensité au niveau supérieur. Il s'agit d'une fonctionnalité de sécurité afin que vous ayez bien conscience de l'intensité d'application à chaque niveau.

L'appareil effectue un contrôle automatique, pendant quelques secondes, à chaque augmentation d'intensité. Pendant ce laps de temps, les voyants d'intensité s'allument de bas en haut.



## APRÈS UTILISATION

Tournez la clé dans le sens anti-horaire, sur la position OFF. Retirez la clé et rangez-la en lieu sûr, hors de la portée des enfants.

# CODES D'ERREUR

Indication	Problème / Solution
 <span style="margin-left: 20px;">1 2 3 4 5</span>	<p><b>PROTECTION CONTRE UNE SURCHAUFFE</b>            Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil. L'appareil doit être sous tension (les ventilateurs de refroidissement fonctionnent) et il faut attendre qu'il refroidisse. Reprenez l'utilisation après 10 à 15 min.</p>
 <span style="margin-left: 20px;">1 2 3 4 5</span>	<p><b>ERREUR VENTILATEUR</b>            Éteignez l'interrupteur à clé, patientez 5 secondes et rallumez-le.</p>
 <span style="margin-left: 20px;">1 2 3 4 5</span>	<p><b>MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE</b>            Éteignez l'interrupteur à clé, patientez 5 secondes et rallumez-le.</p>
 <span style="margin-left: 20px;">1 2 3 4 5</span>	<p><b>DYSFONCTIONNEMENT INTERNE</b>            Éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur à clé et contactez notre service clients.</p>
 <span style="margin-left: 20px;">1 2 3 4 5</span> L'appareil semble être en veille	<p><b>LA TÊTE ACTIVE N'EST PAS FIXÉE CORRECTEMENT</b>            Positionnez-la correctement et éteignez l'appareil, patientez 5 secondes et rallumez-le.</p>

Si l'un des problèmes décrits dans ce tableau persiste ou si les témoins lumineux d'intensité continuent à clignoter, veuillez contacter notre service clients au 01242 702345.

## APPLICATION SUR LE VISAGE

Vous pouvez utiliser votre épilateur Evolution IPL Hair Removeur sur le visage en toute sécurité, sur la zone délimitée par les pointillés blancs.


**Important :** ne pas utiliser autour des yeux et sur les lèvres.



## ZONE D'APPLICATION

Lorsque vous déplacez l'appareil, essayez de décrire une grille, afin de bien couvrir l'ensemble de la zone.

**Important :** Ne PAS utiliser sur la même zone plusieurs fois au cours d'une séance.

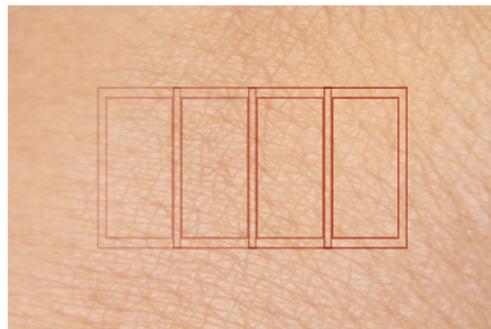

Vous pouvez aussi utiliser un crayon eyeliner blanc pour vous aider à délimiter les zones d'application.


**Important :** ne PAS utiliser un eyeliner foncé ou un feutre pour délimiter cette zone car ces marques réagissent au contact du flash et endommagent la peau.

# CHANGER LA CARTOUCHE

L'épilateur Evolution IPL Hair Remover est doté d'un système d'ampoule hautes performances. Les performances de l'ampoule sont contrôlées après chaque utilisation.




Lorsque il reste 300 flashes le témoin lumineux jaune clignote.

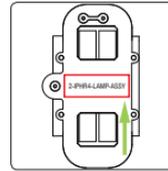

Lorsque vous commandez une cartouche neuve, veuillez indiquer le code imprimé sur la cartouche.




Lorsque le témoin lumineux jaune devient rouge, ceci signifie que l'ampoule doit être changée.

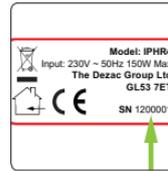

...ou le numéro de série porté sur l'étiquette signalétique de l'appareil.


## CHANGER LA CARTOUCHE

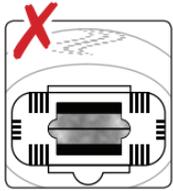

Les cartouches plus anciennes se dégradent et ne permettent pas une utilisation efficace. Elles peuvent également endommager l'appareil si elles ne sont pas remplacées.



Avant de fixer la cartouche neuve, assurez-vous que l'appareil est éteint depuis au moins 5 minutes, le temps qu'il refroidisse.

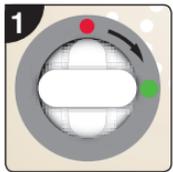

### ÉTAPE 1


Allumez l'appareil et saisissez le code de sécurité.



### ÉTAPE 2

Appuyez sur les boutons (-) et (+) en même temps, et maintenez-les enfoncés pendant que l'appareil effectue un contrôle automatique. L'intensité 5 s'allume.

**Remarque :** les étapes 1 et 2 sont importantes car elles permettent de réinitialiser le compteur de flashes.

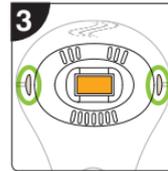


### ÉTAPE 3

Appuyez sur les deux boutons de libération de la tête active et retirez-la.

**L'appareil s'éteint automatiquement.**

# CHANGER LA CARTOUCHE

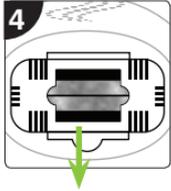

## ÉTAPE 4


Retirez la cartouche usagée.

**Important :** ne PAS toucher les surfaces vitrées de l'ampoule car elles peuvent être chaudes.




## ÉTAPE 5

Pour fixer la cartouche neuve, assurez-vous d'emboîter la rangée de broches de connexion dans les orifices prévus à cet effet, à l'intérieur de l'appareil.

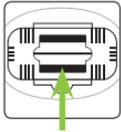


Appuyez pour finir de mettre la cartouche en place.

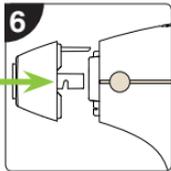

## ÉTAPE 6


Assurez-vous que la tête active est correctement alignée et appuyez légèrement dessus.

**L'appareil s'allume automatiquement.**

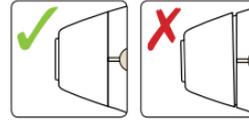

Vérifiez l'absence d'interstices. Si la tête active n'est pas correctement mise en place, l'appareil passe en veille.

Positionnez correctement la tête active, éteignez l'appareil, patientez 5 secondes et rallumez-le pour le réinitialiser (reportez-vous à la rubrique "Codes d'erreur").

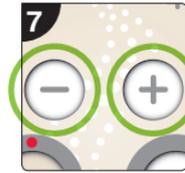


## ÉTAPE 7

Appuyez sur les boutons (-) et (+) en même temps, et maintenez-les enfoncés. Le témoin lumineux indicateur de l'ampoule et l'intensité 5 s'éteignent. Le bouton de mise en route clignote bleu, ce qui signifie que l'appareil est prêt à être utilisé de nouveau.

**Remarque :** l'appareil ne s'allume pas si l'ampoule n'est pas fixée correctement ou si elle n'est pas fixée du tout.

# CYCLE DE CROISSANCE DES POILS

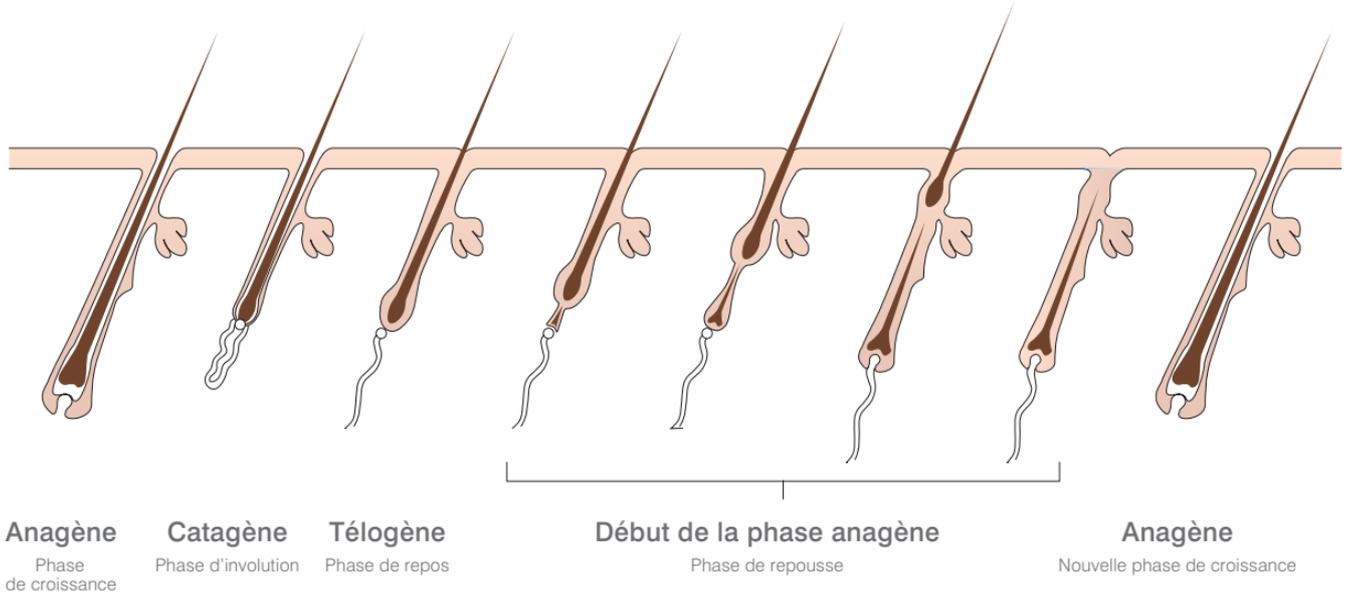

## COMBIEN D'APPLICATIONS SONT-ELLES NÉCESSAIRES ?

En fonction des personnes, les poils poussent différemment : l'âge, le poids, le métabolisme, les hormones, l'ethnicité, les médicaments et d'autres facteurs ont une incidence sur ce processus. Toutefois, les poils passent tous par trois phases de croissance distinctes :

**une phase de croissance active (appelée phase anagène), une phase de régression (phase catagène),** au cours de laquelle le poil cesse de pousser mais n'est pas encore détaché, et la **phase de repos (phase télogène),** lorsque le poil tombe et qu'un nouveau poil commence à se former.

L'efficacité de l'utilisation de l'IPL est optimale lorsque les poils sont en phase de repousse active. À tout moment, un certain pourcentage de poils est en phase de repousse active (le pourcentage réel varie d'une zone du corps à l'autre). Grâce à l'IPL, les impulsions douces de lumière intense ciblent le follicule pileux. Ces impulsions agissent pour neutraliser la racine du poil sans endommager la périphérie.

Pour s'attaquer à tous les poils en phase active, il est préférable de prévoir plusieurs applications sur un certain nombre de mois (au moins six utilisations sur une période de six mois). Ensuite, une utilisation rapide toutes les 4 à 6 semaines devrait vous garantir une peau lisse et satinée tous les jours.

Zone du corps	Densité folliculaire par cm carré	Phase de repos	Durée de la phase de repos	Croissance active
Visage	500	68%	10 semaines	30%
Bras	80	18%	5 mois	79%
Jambes	60	18%	6 mois	79%
Aisselles	65	28%	3 mois	69%
Torse/Dos	70	28%	3 mois	69%
Pubis	70	25%	3 mois	71%

# QUESTIONS/RÉPONSES

## **Comment dois-je préparer ma peau à une épilation IPL ?**

L'épilation IPL se pratique sur peau propre. L'épilation IPL est plus efficace sur les peaux pâles. Ne PAS s'exposer au soleil, ne PAS utiliser de soins bronzants ni d'auto-bronzant avant d'utiliser cet appareil.

## **Comment dois-je préparer les poils à une épilation IPL ?**

Rasez la zone d'application. En réduisant la longueur des poils, l'énergie lumineuse pénètre directement dans la racine du poil et évite de brûler les poils à la surface de la peau.

## **Sur quelles zones puis-je utiliser l'appareil ?**

L'IPL permet d'épiler la plupart des parties du corps. Les aisselles, les jambes, le torse, le dos et le maillot sont les zones les plus souvent concernées. L'appareil peut être utilisé sur certaines parties du visage, mais il ne doit pas être appliqué autour des yeux et des lèvres. Reportez-vous à la rubrique "Utilisation sur le visage" avant de l'utiliser sur cette partie du corps.

## **Quelles sont les sensations ressenties ?**

La plupart des personnes ressentent un échauffement de la peau. Si l'intensité utilisée est trop élevée, ou si la zone n'a pas été rasée, vous pouvez ressentir une légère irritation, similaire à un léger coup de soleil. Chez les hommes, cette gêne peut être accentuée car la pilosité masculine est en principe plus épaisse

que celle des femmes. Cette sensation disparaît néanmoins rapidement.

## **Puis-je opter pour l'épilation IPL sur une peau sensible ?**

Oui. L'IPL cible les poils. La peau, autour des poils, ne doit donc pas être affectée.

## **Quelle apparence aura ma peau après utilisation ?**

Généralement, vous ne constaterez pas de différence. Votre peau peut légèrement rougir après utilisation, mais cette rougeur s'atténue normalement après 24 heures. Vous pouvez constater une rougeur localisée autour du follicule pileux : il s'agit d'un phénomène tout à fait normal. Toutefois, si une rougeur ou une inflammation persiste après 24 heures, ceci peut indiquer que l'intensité sélectionnée était trop élevée pour votre type de peau. Merci de vous reporter à la rubrique "Test épicutané".

## **Apparemment, l'appareil ne fonctionne pas.**

- Assurez-vous que l'appareil est branché et que la clé de sécurité est positionnée sur ON.
- Vérifiez l'absence d'interstices. Si la tête active n'est pas correctement mise en place, l'appareil passe en veille. Positionnez correctement la tête active, éteignez l'appareil, patientez 5 secondes et rallumez-le pour le réinitialiser (reportez-vous à la rubrique "Codes d'erreur").

# QUESTIONS/RÉPONSES

## **Faut-il éviter certaines choses après l'épilation IPL ?**

Évitez de vous exposer au soleil ou un bronzage intense pendant au moins 48 heures.

Si vous vous exposez, utilisez de la crème solaire. Évitez également d'utiliser des nettoyants abrasifs ou des soins corporels exfoliants. Évitez de vous baigner dans de l'eau chlorée ou dans un jacuzzi pendant 48 heures. Le chlore de l'eau peut provoquer des démangeaisons.

## **À quelle fréquence dois-je renouveler l'épilation IPL ?**

La fréquence d'utilisation de suivi n'est pas d'une importance primordiale. Au début, nous recommandons des utilisations à 2 semaines d'intervalle, bien que certaines personnes préfèrent épiler la zone chaque semaine voire même tous les deux jours pour éliminer les poils visibles, tandis que d'autres optent pour une utilisation mensuelle.

## **Dois-je effectuer des soins après l'épilation ?**

Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer une lotion apaisante sans parfum, une poche de glace ou une serviette humide pour refroidir les zones concernées. Nous conseillons de ne pas utiliser de savon sur les zones concernées pendant 24 heures. Pendant 3 jours, veillez à la stricte propreté des zones concernées. Lorsque vous avez épilé les aisselles, évitez d'utiliser un déodorant anti-transpirant pendant 2 à 3 jours. Évitez toute exposition superflue

au soleil pendant 48 heures.

## **De combien d'utilisations aurai-je besoin ?**

L'épilation longue durée à La Lumière Pulsée est généralement considérée comme efficace après un minimum de six utilisations sur une période de 6 mois. Cela varie d'une personne à l'autre et cela dépend de la zone concernée. Les poils foncés sur peaux claires répondent le mieux à l'IPL, mais les poils foncés et clairs peuvent nécessiter plusieurs utilisations pour obtenir des résultats durables. À chaque utilisation, vous remarquerez un éclaircissement progressif des poils sur la zone concernée. Pour conserver une peau parfaitement épilée, répétez l'utilisation toutes les 4 à 6 semaines ou selon les besoins.

## **Puis-je utiliser d'autres méthodes d'épilation entre les différentes utilisations de l'appareil ?**

L'IPL nécessite la présence d'un poil dans le follicule. Les méthodes d'épilation qui arrachent les poils, comme la cire, les épilateurs et les méthodes qui pincent les poils ne conviennent PAS entre les différentes utilisations de l'appareil. La décoloration de poils ne convient PAS non plus car elle élimine les pigments, rendant ainsi l'IPL inefficace. Le rasage, les disques de micro-dermabrasion et les crèmes dépilatoires sont des méthodes qui conviennent parfaitement entre les différentes utilisations de l'appareil.

# QUESTIONS/RÉPONSES

## Quelle est la différence entre l'IPL et le laser ?

Il existe deux différences majeures entre le laser et la lumière pulsée intense. L'IPL couvre en principe une surface beaucoup plus importante que le point d'action, relativement petit, du laser. L'IPL, en couvrant une plus grande surface, est une méthode bien plus rapide. L'autre différence réside dans la longueur d'onde de la lumière émise. Le laser émet une lumière via une longueur d'onde spécifique tandis que l'IPL utilise un large spectre de longueurs d'ondes. C'est pourquoi l'utilisation de l'IPL est limitée à certains types de peau.

## La surface couverte est-elle importante ?

20 mm x 10 mm

## Pourquoi est-ce important de raser la zone concernée ?

Il est important de raser toutes les zones concernées de façon à ce que toute l'énergie lumineuse pénètre directement dans la racine du poil pour une efficacité maximale. Le rasage permet également d'éviter que les poils ne soient brûlés à la surface de la peau, ce qui peut s'avérer inconfortable. Les poils brûlés peuvent également endommager la tête active.

## De quelles fonctionnalités de sécurité l'appareil est-il doté ?

La fonctionnalité de sécurité principale régule l'intensité : il n'est alors possible de l'augmenter que d'un niveau par application,

en commençant par l'intensité 1. Cette fonction réduit le risque d'utiliser une intensité trop élevée. L'intensité peut être diminuée en autant d'étapes que nécessaires.

Parmi les autres fonctionnalités de sécurité, on peut citer :

- Un clé de sécurité.
- Un code de sécurité pour éviter toute utilisation inappropriée.
- Des capteurs cutanés, visant à garantir que La Lumière Pulsée est émise uniquement lorsque ces capteurs sont bien en contact avec la peau.
- Un filtre anti-UV au niveau de la fenêtre IPL, afin d'éviter tout risque d'endommager la lumière UV.
- Une détection de surchauffe.

## Existe-t-il des effets secondaires ?

À l'instar de tous les épilateurs à énergie lumineuse, la peau peut légèrement rougir après utilisation ou la peau peut présenter des éclaircissements, sous forme de taches. Ces deux phénomènes doivent disparaître en 24 heures.

## IMPORTANT

- Lorsque vous ne vous servez pas de l'appareil, rangez la (les) clé(s) hors de la portée des enfants.
- L'utilisation de l'IPL ne doit pas provoquer de forte gêne. Il se peut que vous ressentiez un léger échauffement de la zone concernée. Si vous ressentez une gêne ou une douleur, il se peut que le réglage soit trop élevé.
- Ne pas couvrir les orifices d'aération pendant l'utilisation.
- Ne PAS utiliser après avoir consommé de l'alcool, si vous ne vous sentez pas bien ou si vous êtes fatigué.
- Ne PAS utiliser à proximité d'appareils à ondes courtes ou à micro-ondes.
- L'appareil peut être perturbé par les interférences électromagnétiques. Si vous suspectez de tels effets, veuillez éteindre et rallumer l'appareil pour qu'il se réinitialise.
- Ne PAS forcer les fonctions de sécurité.
- Ne PAS utiliser ce produit pour des usages autres que ceux décrits dans ce mode d'emploi.
- Ce produit est destiné à un usage domestique. Il n'est pas prévu pour un usage dans un environnement commercial.
- Pour une utilisation efficace, veillez à ce que la fenêtre IPL orange et les parties plastiques autour restent

## ENTRETIEN

- propres. Nettoyez-les avec un chiffon non pelucheux ou un coton-tige, en veillant à ne laisser aucune fibre sur l'ouverture. Si vous ne rasez pas les zones concernées avant utilisation, vous risquez de laisser des marques indélébiles sur le plastique. Il faudra alors peut-être changer la tête active ; reportez-vous au formulaire de commande des accessoires.
- Pour nettoyer l'appareil, essuyez-le avec un chiffon légèrement humide.
  - Utilisez ce produit uniquement avec le câble électrique fourni.
  - Après utilisation, débranchez toujours le câble électrique et rangez l'appareil hors de la portée des enfants.
  - En cas de dommages de l'appareil ou du câble électrique, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.
  - Si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son représentant ou une personne aux qualifications similaires, afin d'éviter tout danger.
  - L'appareil et la cartouche ne contiennent aucune pièce pouvant être entretenue par l'utilisateur. Ne PAS démonter ou réparer. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, contactez notre service clients.

# SPÉCIFICATIONS

## APPAREIL :

**Source optique**            Système de luminothérapie à lumière pulsée intense

**Zone couverte :**            20 mm x 10 mm

**Longueur d'onde de sortie :** >560 nm

**Entrée :**                        230 V CA ~ 50 Hz 150 W

# ENVIRONNEMENT

## Température :

En fonctionnement :    0 à 35 degrés Celsius

Stockage :                    -20 à 50 degrés Celsius

## Humidité :

En fonctionnement :    10 % à 60 % HR

Stockage :                    5 % à 90 % HR

## ÉLIMINATION



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEE) (2002/96/EC) a été mise en œuvre en vue de recycler les produits en ayant recours aux meilleures techniques à disposition en matière de récupération et de recyclage, afin de minimiser l'impact environnemental, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter d'accentuer la décharge dans la nature.

Le produit est classé dans les équipements électriques ou électroniques. Donc, veillez à ce qu'en fin de vie ce produit et la cartouche soient éliminés de façon correcte conformément aux exigences des autorités locales. Ils ne doivent PAS être éliminés avec les déchets ménagers.

## ASSISTANCE CLIENTS

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés, veuillez appeler notre ligne d'assistance Rio au : **01242 702345** ou nous adresser un e-mail à cette adresse : **[online@riobeauty.com](mailto:online@riobeauty.com)**

Pour vous enregistrer en ligne et bénéficier d'une garantie de deux ans, rendez-vous sur : **[www.riobeauty.com/warranty\\_online.htm](http://www.riobeauty.com/warranty_online.htm)**



F



Rio, Dezac and EVOLUTION™ IPL Hair Remover are trademarks of The Dezac Group Ltd © The Dezac Group Ltd 2012  
Manufactured by The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham, England GL53 7ET

[www.riobeauty.com](http://www.riobeauty.com)

1-IN-IPHR4-F/1.0

PATENTS PENDING