

LIPOVACUUM™




FRANÇAIS

NEDERLANDS

LIPOVACUUM™ - SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ

Merci d'avoir acheté le Lipovacuum. Cet appareil permet de bénéficier des avantages de la Lipo-Dermology™ sans nécessiter de visites fréquentes et coûteuses dans des instituts de beauté. La Lipo-Dermology™ est une technique relativement simple qui utilise des impulsions créées par aspiration et les transmet sous forme d'ondes à travers la peau pour stimuler les tissus sous-jacents par le biais d'une compression répétée. Cette stimulation aide à améliorer l'élasticité et la tonicité de la peau, tout en réduisant les relâchements, ainsi que les rides et les ridules.

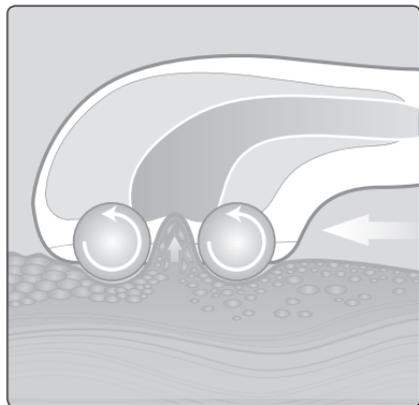

Utilisées sur les parties du corps qui cachent des dépôts graisseux sous-cutanés (souvent accompagnés d'un aspect « peau d'orange »), les ondes de compression par impulsions aident à rompre les cellules de graisse durcies afin de donner à la peau un aspect plus lisse et plus tonifié. La stimulation de la circulation sanguine et le drainage lymphatique oxygènent les tissus touchés en profondeur et les alimentent en nutriments essentiels, tout en éliminant les toxines.

Les différentes têtes de traitement permettent une utilisation sur la plupart des parties du corps. Le Lipovacuum peut même être utilisé sur le visage, avec la petite tête, pour cibler les rides et le relâchement de la peau le long des mâchoires et sur le cou.


Il est important d'effectuer des traitements réguliers sur toutes les parties du corps pour améliorer l'état et la tonicité de la peau de façon durable.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler nos représentants du service clientèle au **+44 (0)1242 702345**. Ils se feront un plaisir de vous aider à obtenir les meilleurs résultats possibles avec votre Lipovacuum.

Lisez attentivement l'ensemble du mode d'emploi et conserver-le afin de pouvoir vous y référer à l'avenir.

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

- 1 Couvercle
- 2 Raccord du tuyau
- 3 Petite tête de traitement par soulèvement
- 4 Grosse tête de traitement à rouleau
- 5 Tête de traitement moyenne à rouleau
- 6 Filtre
- 7 Tuyau
- 8 Point de connexion du tuyau
- 9 Système de fermeture du couvercle
- 10 Cordon d'alimentation
- 11 Bouton Marche/Arrêt
- 12 Bouton d'augmentation de la puissance
- 13 Indicateurs de puissance
- 14 Bouton de diminution de la puissance
- 15 Bouton de sélection du mode
- 16 Bouton de démarrage, d'arrêt et de pause
- 17 Voyant d'avertissement du filtre

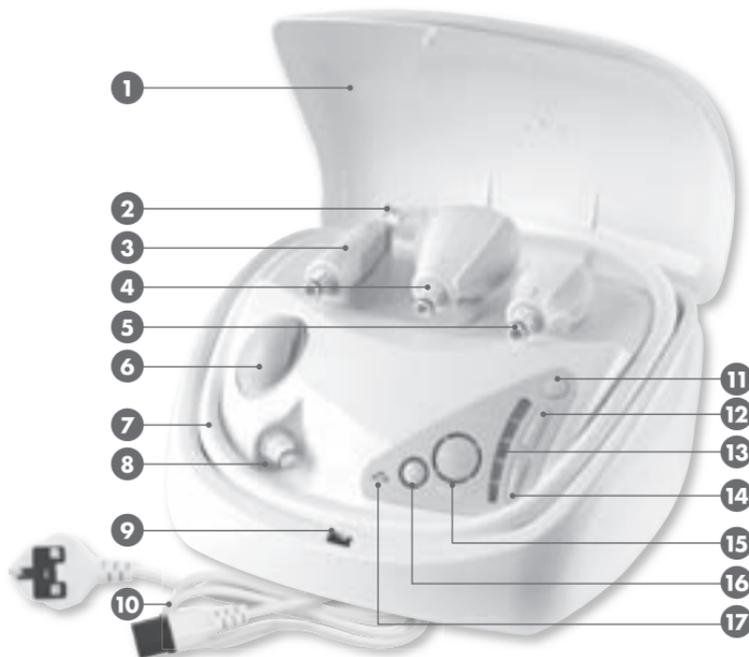

TÊTES DE TRAITEMENT




Grosse tête à rouleau

Cette tête roule sur la peau pendant le traitement. Utilisez-la sur les grandes parties du corps, telles que les jambes, les fesses et le dos.



Tête à rouleau moyenne

Cette tête roule également sur la peau pendant le traitement et peut être utilisée sur des zones plus réduites, telles que les bras.

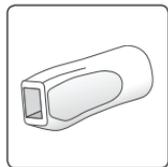


Petite tête de soulèvement

Cette tête permet un soulèvement direct pour un traitement précis des petites parties du corps, telles que le visage, le cou et les mains.

PRÉCAUTIONS


- Consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil en cas de grossesse ou dans les cas suivants : pacemaker, problèmes cardiaques, épilepsie, diabète, sclérose en plaques ou convalescence suite à une opération.
- N'utilisez pas l'appareil sur les parties du corps qui présentent des cicatrices, des lésions, de l'acné rosacée, de l'acné pustuleuse ou enflammée, une peau scarifiée, de l'eczéma, une peau abîmée, enflammée ou atteinte d'une maladie, ou tout autre problème de peau. Nous conseillons de consulter un médecin en cas de doute.
- N'utilisez PAS l'appareil lorsque des vaisseaux capillaires sont visibles et ne l'utilisez pas excessivement sur une même zone.
- N'utilisez PAS l'appareil pendant les 12 heures qui suivent les traitements suivants : sauna, bain de vapeur, bronzage aux UV, électrolyse, épilation du visage à la cire.
- N'utilisez PAS l'appareil sur des piercings ou des bijoux.
- N'utilisez PAS l'appareil dans le bain ou sous la douche. Ne plongez PAS l'appareil ou les têtes dans l'eau.
- Cet appareil ne convient pas aux personnes qui possèdent des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant son utilisation de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Ne convient PAS aux enfants de moins de 14 ans. Maintenez l'appareil hors de la portée des enfants et des animaux.
- Appareil réservé à une seule personne. Ne partagez PAS les têtes de traitement. Des têtes de rechange peuvent être achetées séparément.
- En cas d'irritation, cessez toute utilisation.
- Réservé à un usage externe.

MODE D'EMPLOI

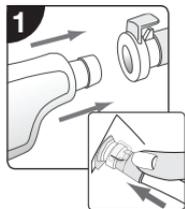


ÉTAPE 1

Branchez le tuyau sur son point de connexion et insérez-le dans la tête de traitement sélectionnée en appuyant simplement dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

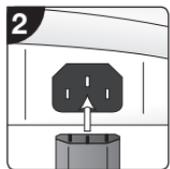

ÉTAPE 2

Branchez le cordon d'alimentation au dos de l'appareil, puis sur une prise de courant. Placez l'appareil sur une surface dure et plane.

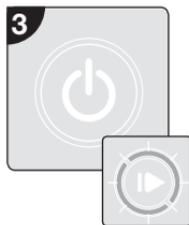

ÉTAPE 3


Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.

Le voyant bleu du bouton de démarrage clignote.




ÉTAPE 4

Lorsque vous êtes prêt(e), appuyez sur le bouton de démarrage. Le voyant reste allumé et la pompe à vide se met en marche. La pompe s'arrête automatiquement au bout de 60 minutes de fonctionnement.

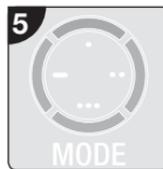

ÉTAPE 5


L'appareil démarre automatiquement en mode de Rupture des tissus grasseeux. Appuyez sur le bouton de sélection du mode pour accéder aux quatre programmes et sélectionner le programme à utiliser.

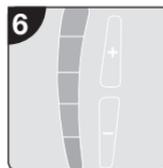

ÉTAPE 6

Utilisez les boutons + et - pour sélectionner le niveau de puissance.

MODE D'EMPLOI

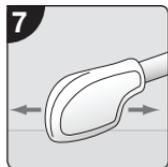

ÉTAPE 7

Faites avancer la tête de traitement sur la peau à l'aide de mouvements brefs, en la déplaçant entre les impulsions. Appuyez légèrement pour empêcher l'air de passer. N'appuyez PAS trop fort.




ÉTAPE 8

Suivez les instructions fournies dans ce mode d'emploi pour la partie du corps traitée.



ÉTAPE 9

Lorsque vous avez terminé, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. Rangez toutes les têtes de traitement et le tuyau dans l'appareil et refermez le couvercle. Débranchez le cordon d'alimentation et rangez-le à l'écart des enfants.

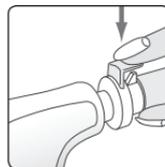

RETRAIT DES TÊTES

Appuyez sur la languette située à l'extrémité du tuyau et retirez la tête de traitement connectée. Assurez-vous que vos doigts ne bloquent pas la trajectoire de la languette du raccord de l'autre côté du tuyau.



PAUSE

Pour faire une pause à tout moment, appuyez sur le bouton de démarrage. Le voyant bleu clignotera jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton pour poursuivre le traitement.




MISE SOUS/HORS TENSION

Pour éteindre l'appareil à tout moment, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.


Remarque : si vous n'appuyez sur aucun bouton, l'appareil passera en mode d'économie d'énergie au bout de 20 minutes. Pour remettre en marche l'appareil, reprenez à l'étape 3.

REPLACEMENT DU FILTRE

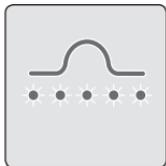

La durée de vie du filtre est d'environ 50 heures. Lorsque le voyant rouge du filtre clignote, le film doit être remplacé. Vous pouvez continuer d'utiliser le Lipovacuum, mais nous recommandons de changer le filtre dès que possible.

Pour obtenir des filtres de rechange, contactez le service clientèle de Rio au + 44 (0)1242 702345 ou envoyez-nous un e-mail à online@riobeauty.com.

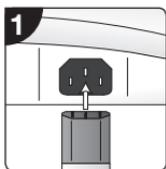

ÉTAPE 1

Branchez le cordon d'alimentation sur l'appareil, puis sur une prise de courant. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Le voyant rouge du filtre s'allume.

Important : maintenez l'appareil allumé pendant cette procédure.




ÉTAPE 2

Alignez le rond vide et le trait de l'appareil en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez le filtre.



ÉTAPE 3

Insérez le nouveau filtre et verrouillez-le en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour aligner le rond plein et le trait.

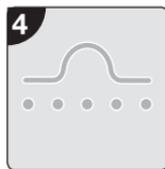


ÉTAPE 4

Le voyant d'avertissement du filtre s'éteint.


Remarque : lorsque le voyant du filtre reste allumé, sans clignoter, cela signifie que le filtre n'est pas correctement installé. L'appareil ne fonctionnera pas sans filtre ou si le filtre n'est pas correctement installé. Si tel est le cas, retirez le filtre et réinstallez-le correctement.

MODES DE TRAITEMENT

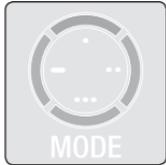


Rupture des tissus gras

Les impulsions ciblent la couche sous-cutanée pour favoriser la rupture des tissus gras, couramment appelés cellulite. Des sessions régulières peuvent réduire considérablement l'aspect « peau d'orange » de la peau.

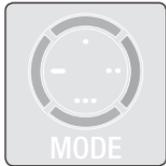

Tonification et raffermissement de la peau

Les impulsions allongées étirent doucement la peau pour stimuler la circulation sanguine et offrir un effet tonifiant.

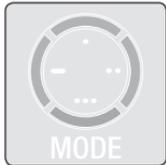

Massage de détente musculaire

Le vide masse doucement les muscles afin qu'ils se relâchent et se détendent.



Stimulation vasculaire

L'aspiration continue stimule la peau et augmente l'arrivée du sang à sa surface pour la fortifier et la revitaliser.

Pendant l'utilisation de l'appareil

Lorsque vous utilisez le Lipovacuum, il est important que vous vous détendiez et que vous preniez le temps de travailler méthodiquement sur la zone traitée.


Pour des résultats optimaux, essayez de ne pas laisser passer l'air lorsque vous déplacez la tête de traitement sur la peau à l'aide de mouvements brefs entre les impulsions.

Suivez les instructions fournies dans ce mode d'emploi pour les différents modes et les différentes parties du corps. Bien que le Lipovacuum soit un appareil très sûr et efficace, il est important de se souvenir des règles qui s'appliquent à tous les produits de massage :

- N'utilisez PAS l'appareil de manière répétée sur une même zone, car ceci peut rendre la peau sensible au toucher. Il est également important que vous « écoutiez » votre corps. En cas de gêne, réduisez la puissance ou passez à une autre partie du corps.
- N'utilisez PAS l'appareil sur les varices, les grains de beauté épais ou les excroissances.
- N'utilisez JAMAIS l'appareil directement sur la colonne vertébrale, derrière les genoux ou sur les articulations des coudes. N'appuyez jamais sur ces parties du corps.
- Lorsque vous traitez le contour des yeux, maintenez la tête de traitement en permanence à 2 centimètres au moins de l'œil. Ne la placez PAS directement au-dessus ou en dessous de l'œil.

Enfin, pour favoriser un drainage lymphatique, terminez toujours avec un mouvement de balayage en direction du cœur.

HANCHES ET FESSES

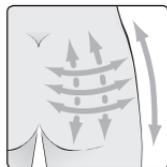

La graisse a tendance à s'accumuler principalement au niveau des hanches et des fesses. Avec le temps, ces dépôts de tissus gras peuvent se développer à un tel point qu'un effet de peau d'orange finit par apparaître à la surface de la peau.

Ces dépôts gras durcis sont difficiles à perdre en faisant simplement un régime et du sport. Le Lipovacuum peut être utilisé pour cibler directement cette couche de graisse sous-cutanée.

L'effet de soulèvement et de roulement du Lipovacuum stimule également le système lymphatique et la circulation locale. Le fait d'encourager le drainage lymphatique aide à éliminer les toxines et à empêcher l'accumulation des dépôts gras.

 Utilisez l'appareil uniquement sur les parties du corps indiquées. Ne l'utilisez pas directement dans le pli des fesses.



Rupture des tissus gras - Grosse tête
8 minutes maximum de chaque côté
Niveau de puissance : jusqu'au maximum

Déplacez la tête dans un sens, en appuyant fermement, sans vous faire mal, puis recommencez dans le sens inverse. Utilisez le niveau de puissance le plus élevé qui vous convient.



Tonification et raffermissement de la peau
- Grosse tête ; 8 minutes de chaque côté
Niveau de puissance : moyen

Déplacez la tête lentement et méthodiquement sur toute la zone traitée, dans un seul sens, d'un geste fluide en direction du cœur.



Massage de détente musculaire - Grosse tête
8 minutes maximum de chaque côté
Niveau de puissance : confortable à maximum


Traitez le côté et la surface principale de la fesse de gauche à droite, puis de haut en bas.



Stimulation vasculaire - Grosse tête
8 minutes de chaque côté
Niveau de puissance : confortable

Traitez le côté et la surface principale de la fesse de gauche à droite, puis de haut en bas. Utilisez le niveau de puissance qui vous convient.

CUISSES

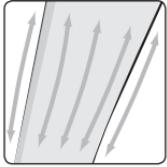

Les cuisses, tout comme les fesses, font partie des principales zones de stockage naturel de la graisse.

Comme pour les hanches et les fesses, les effets de soulèvement et de roulement du Lipovacuum favorisent un drainage lymphatique combiné à un massage pour aider à empêcher l'accumulation de toxines et de dépôts graisseux tout en encourageant la rupture de la graisse sous-cutanée.

Les douleurs musculaires sont fréquentes au niveau des cuisses qui contiennent certains des groupes de muscles les plus importants du corps. Le massage de détente musculaire est idéal pour traiter ces muscles solides et soulager les sensations de fatigue et de douleur.



N'utilisez jamais le Lipovacuum derrière les genoux. Ne l'utilisez PAS sur les zones couvertes de varices.



Rupture des tissus graisseux - Grosse tête / Tête moyenne ; 8 minutes maximum de chaque côté
Niveau de puissance : jusqu'au maximum

Suivez des mouvements verticaux, en maintenant une pression ferme, puis recommencez avec des mouvements latéraux. Terminez avec des mouvements verticaux en direction du cœur. Utilisez le niveau de puissance le plus élevé qui vous convient.



Tonification et raffermissement de la peau - Grosse tête / Tête moyenne ; 6 minutes de chaque côté ; Niveau de puissance : moyen

Déplacez la tête lentement et méthodiquement sur toute la zone traitée avec des mouvements verticaux en direction du cœur.



Massage de détente musculaire - Grosse tête / Tête moyenne ; 8 minutes maximum de chaque côté ; Niveau de puissance : confortable à maximum


Suivez des mouvements verticaux, en maintenant une pression ferme, puis recommencez avec des mouvements latéraux. Terminez avec des mouvements verticaux en direction du cœur.



Stimulation vasculaire - Grosse tête / Tête moyenne ; 6 minutes de chaque côté
Niveau de puissance : confortable

Suivez des mouvements verticaux, en maintenant une pression ferme, puis recommencez avec des mouvements latéraux. Terminez avec des mouvements verticaux en direction du cœur. Le niveau de puissance doit permettre des mouvements aisés.

ABDOMEN

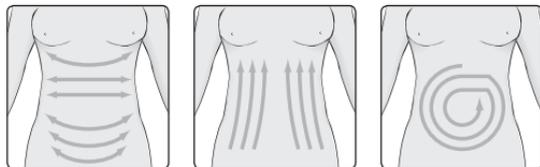

Les principaux organes de l'abdomen ne sont pas protégés par des os. Il est donc très important de n'utiliser qu'une légère pression et une faible puissance sur cette partie du corps.

Les muscles abdominaux forment trois couches : le grand oblique, le petit oblique et le muscle transverse, soutenus sur les côtés par le muscle grand droit. Il s'agit des muscles responsables de la stabilité de notre tronc, qui est essentielle pour notre maintien et définit notre forme.

Comme la graisse se dépose souvent progressivement sur l'abdomen, elle réagit lentement lorsque l'on fait un régime et du sport. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez également le Lipovacuum, car il aide à accélérer la rupture des tissus graisseux.

Si vous avez des problèmes digestifs, vous pouvez utiliser la stimulation vasculaire avec un mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre, de l'extérieur vers l'intérieur. Ce mouvement suit les intestins et peut aider à atténuer les sensations de gêne.

⚠ N'utilisez pas l'appareil sur le nombril. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin.



Rupture des tissus graisseux - Grosse tête 5 minutes maximum. Niveau de puissance : faible

Déplacez la tête horizontalement à travers l'abdomen, en appuyant très légèrement. Recommencez avec des mouvements verticaux. Conservez un niveau de puissance faible et ne dépassez pas la limite de traitement (5 minutes).



Tonification et raffermissement de la peau - Grosse tête / Tête moyenne. 5 minutes maximum Niveau de puissance : faible

Déplacez la tête horizontalement à travers l'abdomen, en appuyant très légèrement. Recommencez avec des mouvements verticaux. Conservez un niveau de puissance faible pour permettre des mouvements aisés.



Massage de détente musculaire Nous déconseillons l'utilisation de ce programme sur l'abdomen.



Stimulation vasculaire - Tête moyenne 5 minutes maximum

Niveau de puissance : faible à confortable

Il est préférable de déplacer la tête de traitement dans le sens des aiguilles d'une montre. Utilisez un niveau de puissance faible qui vous convient.

DOS



Le dos contient trois grands groupes de muscles : le grand dorsal de chaque côté du dos, trois muscles spinaux sur toute la longueur du dos et le muscle rhomboïde entre les omoplates. Ces muscles sont essentiels pour notre maintien, notre mobilité et notre qualité de vie même. Des tensions

et des nœuds peuvent apparaître facilement au niveau du dos, ce qui peut favoriser, voire causer, des maux de tête, des douleurs dans le cou ou le dos, une mauvaise posture et une mauvaise respiration.

Vous aurez besoin d'aide pour utiliser le Lipovacuum sur le dos. Allongez-vous tête vers le bas sur une surface confortable et détendez-vous en respirant régulièrement.

Nous recommandons la grosse tête à rouleau, mais certaines personnes peuvent trouver la tête moyenne plus confortable. Commencez au niveau des épaules, en traitant une épaule après l'autre. Passez ensuite au dos et utilisez des mouvements de balayage du centre vers les côtés. Terminez avec de longs mouvements de balayage verticaux vers le cœur.



N'utilisez PAS l'appareil directement sur la colonne vertébrale ou sur les grains de beauté épais.



Rupture des tissus graisseux - Grosse tête
8 minutes de chaque côté

Niveau de puissance : jusqu'au maximum

Déplacez lentement la tête de traitement en appuyant fermement, sans vous faire mal. Utilisez le niveau de puissance le plus élevé qui vous convient.



Tonification et raffermissement de la peau - Grosse tête. 8 minutes de chaque côté

Niveau de puissance : moyen

Déplacez la tête lentement et méthodiquement sur toute la zone traitée avec un niveau de puissance moyen.



Massage de détente musculaire - Grosse tête
8 minutes maximum de chaque côté

Niveau de puissance : confortable à maximum

Déplacez lentement la tête de traitement en appuyant fermement, sans vous faire mal. Utilisez le niveau de puissance qui vous convient.




Stimulation vasculaire - Grosse tête
10 minutes maximum de chaque côté

Niveau de puissance : confortable

Déplacez lentement la tête de traitement en appuyant fermement, sans vous faire mal. Utilisez le niveau de puissance qui vous convient.

ÉPAULES

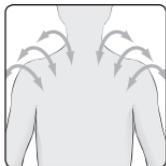

Les tensions et les nœuds sont fréquents dans les épaules et peuvent entraîner des maux de tête, des douleurs dans le cou et une mauvaise posture, ou encore empêcher une respiration décontractante, ce qui peut à son tour augmenter le stress. L'utilisation du Lipovacuum au niveau des épaules

permet de détendre les muscles.

Pendant l'utilisation de l'appareil, détendez-vous en relâchant les épaules et en respirant régulièrement afin de profiter pleinement du traitement. Déplacez la tête sur l'épaule avec un mouvement de va-et-vient en essayant de maintenir le contact avec la peau en permanence.

Bien que vous puissiez utiliser le Lipovacuum sur vos propres épaules, une épaule à la fois, vous vous détendrez davantage et profiterez au maximum du traitement en demandant à un(e) ami(e) de vous aider.



N'utilisez PAS l'appareil directement sur la colonne vertébrale ou la nuque.

N'utilisez PAS l'appareil sur les grains de beauté épais.



Rupture des tissus graisseux - Tête moyenne
4 minutes de chaque côté

Niveau de puissance : jusqu'au maximum

Déplacez la tête dans un sens à travers l'épaule, en appuyant fermement, sans vous faire mal, puis recommencez dans le sens inverse. Utilisez le niveau de puissance confortable le plus élevé.



Tonification et raffermissement de la peau - Tête moyenne. Environ 4 minutes de chaque côté

Niveau de puissance : moyen

Déplacez la tête lentement et méthodiquement sur toute la zone traitée dans un sens, en couvrant toute la peau.



Massage de détente musculaire - Tête moyenne ; 6 minutes maximum de chaque côté

Niveau de puissance : confortable à maximum

Pour réduire la tension des muscles des épaules, déplacez la tête moyenne à travers l'épaule dans les deux sens. Utilisez le niveau de puissance qui vous convient.




Stimulation vasculaire - Tête moyenne
4 minutes de chaque côté

Niveau de puissance : confortable

Déplacez la tête moyenne à travers chaque épaule dans les deux sens. Utilisez le niveau de puissance qui vous convient.

DÉCOLLETÉ

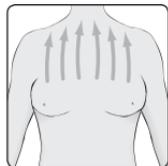

Tout comme sur le visage, la peau fine du décolleté (la partie du corps qui sépare la poitrine du cou) témoigne très facilement du stress et des soucis quotidiens. La texture de la peau se détend progressivement et finit par avoir un aspect de « crêpe ». À l'aide d'une puissance faible et d'une légère

pression, le programme de tonification et de raffermissement offre un traitement doux et relaxant qui stimule la circulation du sang à travers la peau et améliore son teint, sa tonicité et sa fermeté, tout en réduisant les rides et les ridules.

Veillez à ne pas trop traiter la peau sensible de cette zone où les bleus apparaissent facilement.

Ne terminez pas avec des mouvements en direction du cœur pour cette partie du corps.



N'utilisez pas ce traitement en cas d'antécédents cardiovasculaires. Demandez l'avis de votre médecin.



Rupture des tissus graisseux
Nous déconseillons l'utilisation de ce programme sur le décolleté.



Tonification et raffermissement de la peau - Petite tête. 12 minutes
Niveau de puissance : confortable

Déplacez la tête lentement et méthodiquement sur toute la zone traitée en suivant le sens des illustrations. Le niveau de puissance doit permettre des mouvements aisés.



Massage de détente musculaire
Nous déconseillons l'utilisation de ce programme sur le décolleté.



Stimulation vasculaire - Tête moyenne / Petite tête. 12 minutes
Niveau de puissance : confortable

Déplacez la tête lentement et méthodiquement sur toute la zone traitée en suivant le sens des illustrations. Le niveau de puissance doit permettre des mouvements fluides et aisés.

MUSCLES DES MOLLETS



Nous négligeons souvent les muscles de nos mollets qui fournissent pourtant une énorme quantité d'efforts et absorbent beaucoup de stress chaque jour. Ceci est particulièrement vrai pour les personnes qui passent une grande partie de la journée debout.

Les élancements et les douleurs sont souvent ignorés jusqu'à ce qu'ils se transforment en problèmes. Une utilisation régulière du Lipovacuum peut traiter les tensions musculaires dès leur apparition et permettre d'éviter des problèmes sérieux.

Tous les programmes du Lipovacuum favorisent l'arrivée du sang à la surface de la peau pour augmenter la circulation. Tandis que ce résultat est bénéfique pour l'ensemble du corps, il l'est particulièrement pour les mollets. (Ne traitez PAS les zones qui présentent déjà des varices.)

Certains exercices physiques, tels que la course à pied ou le cyclisme, peuvent entraîner des douleurs au niveau des mollets. Tandis que le programme de stimulation vasculaire peut aider à soulager ces douleurs, il est important d'utiliser un faible niveau de puissance et de traiter le muscle délicatement.



N'utilisez jamais le Lipovacuum derrière les genoux. Ne l'utilisez PAS sur les zones couvertes de varices.



Rupture des tissus graisseux - Tête moyenne
4 minutes sur chaque mollet

Niveau de puissance : confortable

Utilisez des mouvements verticaux sur le muscle, en maintenant une pression ferme, sans vous faire mal, puis recommencez avec des mouvements latéraux. Terminez avec des mouvements verticaux en direction du cœur.



Tonification et raffermissement de la peau - Tête moyenne ; 4 minutes sur chaque mollet

Niveau de puissance : confortable

Utilisez des mouvements verticaux en direction du cœur. Le niveau de puissance doit permettre des mouvements aisés.



Massage de détente musculaire - Tête moyenne
4 minutes sur chaque mollet

Niveau de puissance : confortable

Utilisez des mouvements verticaux sur le muscle, puis recommencez avec des mouvements latéraux. Terminez avec des mouvements verticaux en direction du cœur.




Stimulation vasculaire - Tête moyenne
4 minutes sur chaque mollet

Niveau de puissance : confortable

Utilisez des mouvements verticaux en direction du cœur. Le niveau de puissance doit permettre des mouvements aisés.

BRAS

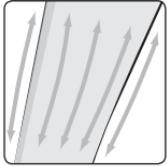

Nous utilisons nos bras et nos mains à longueur de journée, ce qui peut entraîner des tensions et parfois des douleurs. L'effet de massage du Lipovacuum peut

faire disparaître ces tensions et améliorer notre sensation de bien-être.

La partie supérieure des bras est également une source de soucis pour de nombreuses femmes. Ces soucis sont souvent dus à des dépôts de graisse et à des muscles flasques qui pendent sous les bras. Une utilisation régulière du Lipovacuum sur ces parties du corps aidera à raffermir et à tonifier la peau.



Retirez tous les bijoux de vos bras avant d'utiliser le Lipovacuum sur ces parties du corps.



Rupture des tissus graisseux - Tête moyenne
4 minutes sur chaque bras

Niveau de puissance : jusqu'au maximum

Utilisez des mouvements verticaux sur l'avant-bras, puis sur la partie supérieure du bras, en maintenant une pression ferme, sans vous faire mal, puis recommencez avec des mouvements latéraux. Terminez avec de longs mouvements en direction du cœur.



Tonification et raffermissement de la peau - Tête moyenne ; 4 minutes sur chaque bras

Niveau de puissance : moyen

Déplacez la tête lentement et méthodiquement sur toute la zone traitée avec des mouvements verticaux en direction du cœur.



Massage de détente musculaire - Tête moyenne ; 4 minutes sur chaque bras

Niveau de puissance : confortable à maximum

Utilisez des mouvements verticaux sur l'avant-bras, puis sur la partie supérieure du bras, en maintenant une pression ferme, sans vous faire mal, puis recommencez avec des mouvements latéraux. Terminez avec de longs mouvements en direction du cœur.



Stimulation vasculaire - Tête moyenne

4 minutes sur chaque bras

Niveau de puissance : confortable

Utilisez des mouvements verticaux en direction du cœur. Le niveau de puissance doit permettre des mouvements aisés.

VISAGE ET COU



Notre visage est l'une des parties du corps qui témoignent rapidement du stress et des soucis quotidiens. Les rides et les ridules se creusent alors que nous adoptons les mêmes expressions, jour après jour. Le Lipovacuum peut être utilisé sur une faible puissance, en appuyant très légèrement, pour un traitement relaxant qui aide à éliminer les toxines, le stress et les tensions, tout en repulpant la peau de manière à atténuer les rides et les ridules.

En vieillissant, les muscles du visage se détendent et la peau perd de son élasticité. Des rides, des rides du sourire et des pattes d'oies peuvent alors se développer et la peau peut paraître terne et sans éclat. L'effet de soulèvement du Lipovacuum stimule la circulation du sang, ce qui oxygène les tissus et améliore le teint, la tonicité, ainsi que la fermeté de la peau, et réduit les rides et les ridules, pour une peau plus jeune.

Vous pouvez vous servir du Lipovacuum pour cibler des zones spécifiques en utilisant la petite tête de traitement sur une ride particulière.

 Utilisez toujours l'appareil sur une peau nettoyée. Veillez à toujours maintenir la tête de traitement à au moins 2 centimètres des yeux. Ne la placez PAS directement au-dessus ou en dessous de l'œil.



Rupture des tissus gras
Nous déconseillons l'utilisation de ce programme sur le visage et le cou.



Tonification et raffermissement de la peau - Petite tête. 10 minutes

Niveau de puissance : faible à confortable

Déplacez la tête lentement et méthodiquement sur toute la zone traitée en suivant le sens des illustrations. Le niveau de puissance doit rester très faible. Ne tirez pas sur la peau.



Massage de détente musculaire

Nous déconseillons l'utilisation de ce programme sur le visage et le cou.



**Stimulation vasculaire - Petite tête
10 minutes**

Niveau de puissance : confortable

Déplacez la tête lentement et méthodiquement sur toute la zone traitée en suivant le sens des illustrations. Le niveau de puissance doit rester très faible pour permettre des mouvements aisés.

MAINS



Nous utilisons nos mains et nos doigts à longueur de journée. Le fait de masser ces parties du corps peut libérer la tension accumulée et aider les muscles à se détendre.

L'effet de massage et de soulèvement du Lipovacuum aide à améliorer la circulation sanguine vers les mains et les doigts.

L'effet de massage soulage les douleurs et les raideurs et peut aider à prévenir certaines conditions telles que les microtraumatismes répétés.

 Retirez tous les bijoux de vos bras avant d'utiliser le Lipovacuum sur ces parties du corps.



Rupture des tissus graisseux
Nous déconseillons l'utilisation de ce programme sur les mains.



Tonification et raffermissement de la peau - Petite tête. Jusqu'à 5 minutes sur chaque main
Niveau de puissance : faible à confortable

Déplacez la tête lentement et méthodiquement sur toute la zone traitée en suivant le sens des illustrations. Terminez en déplaçant la tête du bout des doigts vers le poignet.



Massage de détente musculaire - Petite tête
Jusqu'à 5 minutes sur chaque main
Niveau de puissance : confortable



Pour soulager les mains douloureuses, traitez la paume (la partie musculaire molle) dans les deux sens, en appuyant légèrement. Utilisez le niveau de puissance qui vous convient.




Stimulation vasculaire - Petite tête
Jusqu'à 5 minutes sur chaque main
Niveau de puissance : confortable

Déplacez la tête lentement et méthodiquement sur toute la zone traitée en suivant le sens des illustrations. Terminez en déplaçant la tête du bout des doigts vers le poignet.


RANGEMENT DU TUYAU

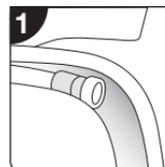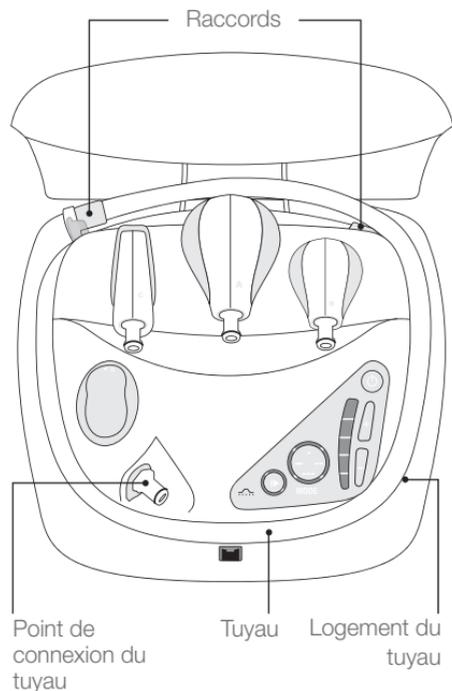**ÉTAPE 1**

Placez une extrémité du tuyau dans le logement situé dans l'angle supérieur droit de l'appareil.

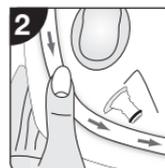**ÉTAPE 2**

Poussez le tuyau dans son logement, le long du bord extérieur de l'appareil.

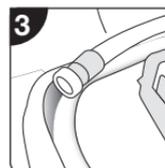**ÉTAPE 3**

L'autre extrémité du tuyau doit arriver dans l'angle supérieur gauche de l'appareil. Lorsque vous refermez le couvercle, assurez-vous que l'extrémité du tuyau est bien rangée à l'intérieur.

AVERTISSEMENTS ET ENTRETIEN

- Utilisez exclusivement ce produit avec l'adaptateur secteur fourni.
- Ne laissez PAS l'appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé au secteur.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, cessez toute utilisation. S'il est défectueux, utilisez un cordon de remplacement adapté.
- Débranchez l'appareil après utilisation et rangez-le à un emplacement qui se trouve hors de portée des enfants.
- L'appareil ne renferme aucun composant pouvant être remplacé par l'utilisateur.
- Toute utilisation abusive de l'appareil peut entraîner des blessures.
- Lorsque l'appareil se comporte de manière inattendue, il est possible que des interférences électromagnétiques externes en soient la cause. Vous devez éliminer cette source d'interférences et remettre l'appareil en marche afin qu'il fonctionne à nouveau correctement.
- Les éclairs blancs rapides au niveau des voyants du niveau de puissance font partie de la procédure de vérification automatique interne et peuvent être ignorés.
- Ne placez PAS l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- N'utilisez PAS l'appareil à l'extérieur. N'utilisez PAS l'appareil à proximité d'aérosols ou de vaporisateurs lorsque de tels produits sont utilisés. N'utilisez PAS l'appareil lorsque de l'oxygène est administré.
- Stockez l'appareil à température ambiante. Ne le stockez pas à des températures inférieures à 5 °C.
- Ne transportez PAS l'appareil par le couvercle ou par le cordon d'alimentation.
- Rangez le tuyau en l'enroulant après chaque utilisation.
- Pour nettoyer l'appareil, débranchez-le et essuyez l'extérieur et l'intérieur du couvercle à l'aide d'une éponge légèrement humidifiée. N'utilisez PAS de solvants ni de détergents.
- Les têtes de traitement peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon humide ou d'une lingette antiseptique. N'utilisez PAS de solvants ni de détergents.



CET APPAREIL EST CONFORME AUX NORMES RÉGLEMENTAIRES EN VIGUEUR EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE.



UTILISATION À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT

SERVICE CLIENTÈLE

Si vous avez des questions ou des difficultés à utiliser ce produit, veuillez contacter notre service clientèle Rio au : **+44 (0)1242 702345** ou envoyez-nous un e-mail à : **online@riobeauty.com**

FRANÇAIS

GARANTIE

Pour vous abonner en ligne à notre garantie de deux ans, veuillez vous rendre sur le site : www.riobeauty.com/warranty_online.htm

APPAREIL USAGÉ



La Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) a été mise en œuvre pour assurer le recyclage des produits à l'aide des meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter les substances dangereuses et d'éviter l'expansion des sites de décharge.

L'appareil appartient à la catégorie des équipements électriques et électroniques. Veuillez par conséquent vous en débarrasser comme il convient en fin de vie, conformément aux exigences des autorités locales, à défaut de quoi veuillez le renvoyer à The Dezac Group Ltd., Cheltenham, PO Box 54, GL14 2WW, Royaume-Uni. Il est IMPÉRATIF de ne pas le jeter avec les déchets ménagers.