

QUESTIONS FRÉQUENTES

COMBIEN DE TEMPS LES PREMIERS RÉSULTATS METTENT-ILS À APPARAÎTRE ?

Dans la plupart des cas, vous commencerez à observer des résultats immédiatement après le premier traitement. Il n'est pas inhabituel que les dents blanchissent de plusieurs tons pendant les premières applications.

Cependant, les résultats varient d'un utilisateur à l'autre. La réaction des taches jaunes est très rapide et visible par rapport à celle des taches bleues / grises et ternes, qui mettent du temps à disparaître. Les taches particulièrement profondes nécessiteront peut-être plusieurs traitements.

QUELLE EST LA FRÉQUENCE D'UTILISATION DE CE TRAITEMENT ?

Au départ, ce traitement peut être utilisé une fois par semaine, voire une fois par jour le premier mois. Lorsque vous avez atteint votre objectif, nous conseillons d'utiliser des traitements d'appoint.

QUELLE EST LA FRÉQUENCE DES TRAITEMENTS D'APPOINT ?

Cela dépend de votre âge et de votre régime alimentaire. Si vous continuez de consommer des aliments et des boissons susceptibles de tacher vos dents, celles-ci finiront à la longue par se couvrir à nouveau de taches. Nous conseillons généralement de réaliser un traitement « d'appoint » une fois par mois, à condition que vous preniez soin de vos dents, conformément aux instructions de votre dentiste et de ce mode d'emploi.

PEUT-ON UTILISER LE TRAITEMENT DE BLANCHIMENT PROFESSIONNEL DES DENTS SUR LES COIFFES ET SUR LES COURONNES ?


La trousse de blanchiment des dents peut uniquement blanchir les dents naturelles, mais peut être utilisée sans danger sur les fausses dents. Vos fausses dents devront être remplacées si vous souhaitez qu'elles soient de la même couleur que vos nouvelles dents blanches. Le traitement de blanchiment des dents ne blanchira pas les fausses dents, y compris les coiffes, les couronnes, les recouvrements, les dentiers, les bridges et les plombes.

COMMENT STOCKER LE GEL DE BLANCHIMENT ?

Stockez le gel de blanchiment à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Tenez-le hors de la portée des enfants.

CAUSES DU JAUNISSEMENT DES DENTS

Bien qu'il existe plusieurs teintes de dents, lorsque celles-ci commencent à se former, elles poussent toutes avec un émail externe blanc. Les aliments et les boissons, tels que le thé, le café, le vin rouge et les plats très colorés, tachent petit à petit cette surface blanche. Les dentifrices abrasifs et les brosses à dent dures (en plus du vieillissement) accélèrent également l'érosion de la surface des dents (l'émail blanc), ce qui expose le centre en dentine jaune qui se cache derrière.

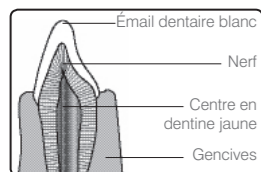

INFORMATION

- Pour des raisons d'hygiène, chaque gouttière doit être utilisée par une seule personne.
- Ne désassemblez AUCUNE pièce de ce produit. Il ne renferme aucun composant pouvant être remplacé par l'utilisateur. En cas de panne, renvoyez l'appareil à Rio ou à son agent de réparation.
- Ne plongez PAS l'unité électrique ou l'émetteur de lumière bleue dans de l'eau. Il suffit d'essuyer l'unité à l'aide d'un chiffon humidifié pour la nettoyer. Vous pouvez laver la gouttière à l'eau chaude une fois que vous l'avez détachée de l'émetteur de lumière.
- Utilisez uniquement l'unité électrique et l'émetteur conformément à leur mode d'emploi.
- Ne démontez PAS l'appareil et ne tentez pas de le réparer. En cas de difficultés d'utilisation, contactez le service clientèle.
- N'ouvrez PAS l'unité.
- Utilisez cet appareil exclusivement avec l'adaptateur secteur fourni.

APPAREIL USAGÉ



La Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) a été mise en œuvre pour assurer le recyclage des produits à l'aide des meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter les substances dangereuses et d'éviter l'expansion des sites de décharge.

L'appareil appartient à la catégorie des équipements électriques et électroniques. Veuillez par conséquent vous en débarrasser comme il convient en fin de vie, conformément aux exigences des autorités locales. Il est IMPÉRATIF de ne pas le jeter avec les déchets ménagers.


SERVICE CLIENTÈLE

Si vous avez des questions ou des difficultés à utiliser ce produit, veuillez contacter notre service clientèle Rio au +44 (0)1242 702345,

ou nous envoyer un courrier électronique à l'adresse :
online@riobeauty.com

Pour vous abonner en ligne à notre garantie de deux ans, veuillez vous rendre sur le site : www.riobeauty.com/warranty_online.htm

PROFESSIONAL™ TEETH WHITENING

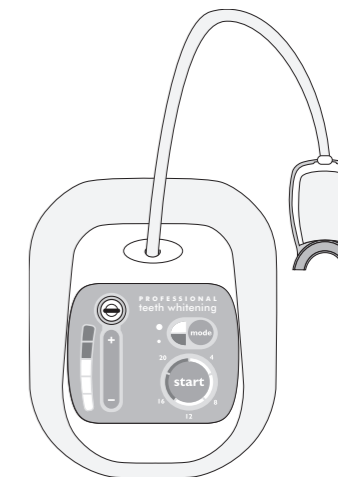

La trousse Professional Teeth Whitening permet d'obtenir rapidement des dents blanches à domicile. Rapide, sûre et simple à utiliser, la formulation spéciale du gel de blanchiment, combinée à la technologie de la lumière bleue, agit rapidement pour éliminer les taches dentaires en surface et en profondeur, telles que les taches causées par le thé, le café, le vin rouge, ainsi que les décolorations dues au tabac et au vieillissement.

Il est important de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire grâce à des visites régulières chez un dentiste. Ce produit ne remplace pas les visites chez le dentiste.

1-IN-DCWH7-F/1.0

PRÉCAUTIONS

- Ne PAS avaler.
- Ne PAS utiliser pendant les traitements orthodontiques.
- Usage déconseillé chez les femmes enceintes.
- Lors de l'utilisation du gel de blanchiment, éviter tout contact avec les yeux. Si du gel entre en contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau.
- Ne PAS utiliser plus d'une fois par jour.
- Ne PAS utiliser pendant plus de 20 minutes par application.
- En cas de gêne, cesser toute utilisation du produit et rincer abondamment à l'eau.
- En cas de déchaussement des dents, de maladie des gencives, quelle qu'elle soit, ou d'infection dentaire, consulter impérativement un dentiste avant d'utiliser ce traitement. Nous déconseillons d'utiliser ce produit en cas de gingivite ou d'aphtes buccaux, ou encore en cas de blessures buccales.
- En cas de dent / gencive sensible ou irritée, cesser d'utiliser le produit et consulter un dentiste. Nous vous conseillons d'avertir votre dentiste si vous utilisez un produit de blanchiment des dents.
- Cet appareil ne convient pas aux personnes (y compris les enfants) qui possèdent des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant son utilisation de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

IMPORTANT

Ce produit est conforme aux règlements européens sur la sécurité des produits cosmétiques.




Rio, Dezac and Professional Teeth Whitening
are trademarks of The Dezac Group Ltd
© The Dezac Group Ltd 2010
PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET
www.riobeauty.com

BLANCHIMENT PROFESSIONNEL DES DENTS

AVANT DE COMMENCER

BLANCHIMENT PROFESSIONNEL DES DENTS

UTILISATION DE L'UNITÉ DE BLANCHIMENT DES DENTS

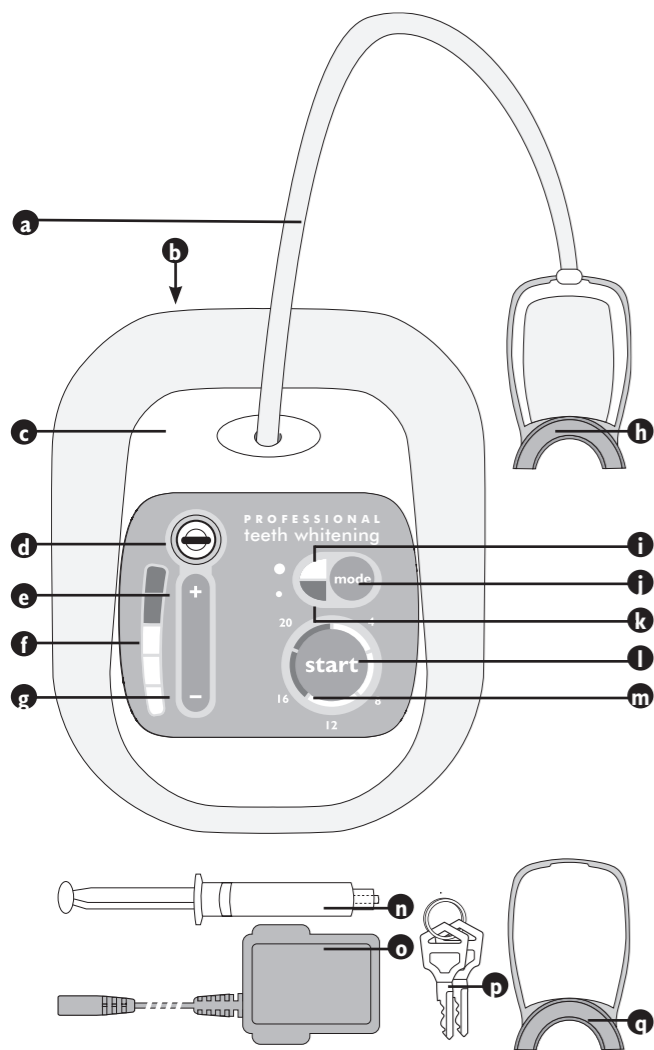


- a. Support flexible
- b. Prise de l'adaptateur électrique
- c. Unité électrique
- d. Interrupteur à clé
- e. Bouton d'augmentation de la puissance (+)
- f. Indicateur du niveau de puissance
- g. Bouton de diminution de la puissance (-)
- h. Émetteur de lumière bleue
- i. Indicateur de programme de traitement complet
- j. Bouton de sélection du mode
- k. Indicateur de programme d'appoint
- l. Bouton marche / arrêt
- m. Témoins de la minuterie
- n. Gel de blanchiment
- o. Adaptateur secteur
- p. Clés de sécurité
- q. Gouttière


MISE EN FORME DE LA GOUTTIÈRE

Cet article n'est pas recommandé pour les enfants âgés de moins de 14 ans. Tenez la gouttière à l'écart des sources de chaleur extrême. Par exemple, ne la placez pas dans un lave-vaisselle et évitez de la laisser au soleil.


IMPORTANT: les étapes suivantes ne doivent jamais être réalisées lorsque la gouttière est installée sur l'émetteur de lumière bleue.

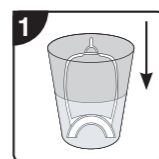


1 Versez 4 cm d'eau chaude du robinet (n'utilisez PAS d'eau bouillante) dans un récipient adapté et laissez la gouttière tremper dans l'eau pendant environ 60 secondes.

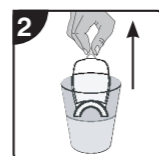

2 Retirez soigneusement la gouttière de l'eau en veillant à ne pas l'endommager alors qu'elle se trouve dans un état malléable. Retirez délicatement l'excès d'eau en secouant.

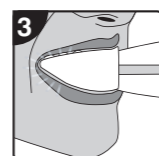

3 Placez les dents dans les parties creusées de la gouttière. Vous ressentirez une sensation de chaleur sur les gencives. Ceci est normal. Serrez doucement les dents. Maintenez les dents serrées pendant 30 secondes.

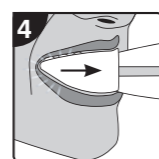


4 Retirez la gouttière et placez-la dans de l'eau froide pendant 60 secondes pour la faire refroidir. Le cas échéant, répétez les étapes 1 à 4 afin de mieux adapter la gouttière à vos dents.


Votre gouttière est désormais prête à l'emploi.

PRÉPARATION

Avant d'utiliser le traitement de blanchiment professionnel des dents, brossez-vous les dents et utilisez un bain de bouche pour éliminer toutes les particules alimentaires. En cas de dépôt important de plaque dentaire ou de tartre sur les dents, un nettoyage par un dentiste est conseillé avant tout traitement de blanchiment.

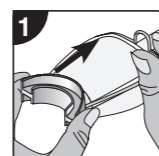

1 Lavez la gouttière à l'eau chaude (les gouttières sont pré-stérilisées). Poussez la gouttière sur la languette de mise en place située à l'avant de l'émetteur de lumière bleue. Maintenez-la en place en faisant passer le bandeau sur les côtés et à l'arrière de l'émetteur.

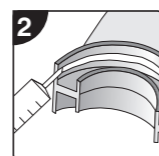

2 Retirez le capuchon du tube de gel de blanchiment. Appliquez une ligne de gel dans la gouttière. Remplacez le capuchon sur le tube.

Il est conseillé d'augmenter progressivement la puissance des traitements de blanchiment des dents. Commencez par le programme de « traitement complet » en le réglant sur la puissance 1. Augmentez la puissance à chaque traitement, jusqu'à ce que vous obteniez l'effet de blanchiment souhaité ou le niveau de puissance maximal.

Pour conserver la couleur blanche obtenue, utilisez le programme de « traitement d'appoint », qui dure 12 minutes seulement.



PROGRAMME DE TRAITEMENT COMPLET

Lorsque ce programme est sélectionné, le témoin supérieur s'allume en vert. Ce programme dure 20 minutes.



PROGRAMME D'APPOINT

Lorsque ce programme est sélectionné, le témoin inférieur s'allume en vert. Ce programme dure 12 minutes.



BOUTON MARCHÉ / ARRÊT

Appuyez sur le bouton marche / arrêt pour commencer le traitement.


Pour faire une pause à tout moment, appuyez tout simplement sur le bouton marche / arrêt, et appuyez à nouveau dessus pour reprendre le traitement.



MINUTERIE

La durée du programme est indiquée par des segments de 4 minutes, qui s'allument dès que vous appuyez sur le bouton marche / arrêt. Le segment qui clignote indique le temps de traitement restant.


En cas de pause en cours de traitement, le segment concerné cesse de clignoter.

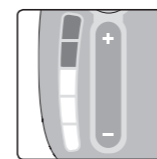


PUISSANCE

Il existe 5 niveaux de puissance. Lors de la première utilisation de l'appareil, réglez-le sur le niveau 1. Augmentez progressivement la puissance de traitement.


Le niveau de puissance peut varier pendant le traitement.

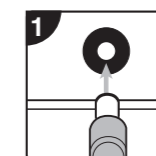


1 Insérez l'adaptateur secteur dans la prise située au dos de l'unité, puis branchez-le sur une prise de courant.

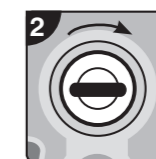


2 Déverrouillez et allumez l'unité à l'aide de la clé de sécurité.

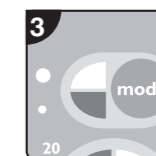


3 Appuyez sur le bouton de sélection du mode pour choisir le programme à utiliser. Les indicateurs de programme s'allument pour indiquer le programme sélectionné.

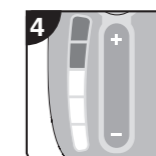


4 Utilisez les boutons + et - pour sélectionner le niveau de puissance.

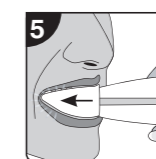

5 Placez la gouttière dans votre bouche de manière à ce qu'elle repose contre vos dents. Une fois la gouttière en place, détendez vos lèvres.

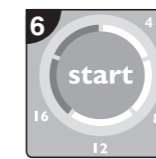

6 Appuyez sur le bouton marche /arrêt pour lancer le traitement. Les témoins de la minuterie indiquent le temps restant.

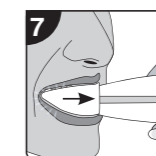

7 Une fois le traitement terminé, retirez la gouttière de l'émetteur de lumière bleue et lavez-la soigneusement à l'eau chaude. Laissez-la sécher à l'air libre avant de la ranger. Rincez-vous la bouche avec de l'eau (n'avalez pas).



Lorsque vous ne l'utilisez pas, placez tout simplement la gouttière au-dessus de l'unité électrique. Le support flexible maintiendra alors l'émetteur de lumière bleue en place.